
Design your own road

www.whill-europe.com







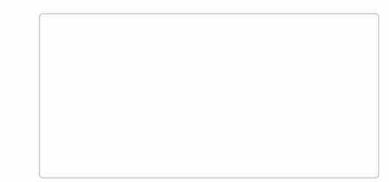

WHILL Model C

Goditi la vita su ruote nuove

*Il Modello C è manovrabile sul marciapiede.

Stare all'aria aperta, incontrare gli amici, godersi il cambio di stagione e fare la spesa per cena sono fatti comuni della vita quotidiana. WHILL Model C è stata progettata e realizzata

per aiutarti ad apprezzarli in modo semplice.

"Se solo riuscissi a caricare la carrozzella in auto agevolmente e poter andare lontano."

"Potere scegliere un colore adatto al mio stile

mi farebbe senz'altro desiderare di uscire più spesso.'

Praticità, libertà, stile... sono solo alcune delle cose che desideriamo nel quotidiano.

Il nuovo dispositivo per la mobilità è dotato di tecnologia all'avanguardia

e idee in grado di soddisfare i tuoi desideri.

Con WHILL Model C non proponiamo

un mezzo di trasporto, ma uno stile di vita completamente nuovo.






Pratica


Curvatura stretta, maggiore adattabilità

La praticità va di pari passo con la capacità di raggiungere luoghi diversi. Per questo abbiamo sviluppato le speciali ruote anteriori, che consentono sia la rotazione, sia il movimento laterale. Grazie alla tecnologia all'avanguardia di cui dispone, WHILL Model C è stata realizzata in modo da facilitare il tuo stile di vita anche nelle piccole cose, come la spesa quotidiana, e nelle attività indoor, in quanto potrai sentirti più a tuo agio alla guida di un dispositivo elettrico.

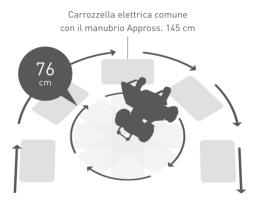

5cm

Le omni-wheel sono pneumatici monopezzo dotati di una serie di rotelline. Ciascuna si sposta lateralmente consentendo una rotazione circolare di 76 cm. Grazie alle ruote anteriori larghe e al motore ad alta potenza, Model C può superare ostacoli alti fino a 5 cm.

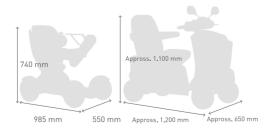

La struttura compatta (larghezza 550 mm x lunghezza 985 mm x altezza 740 mm) ti consente di guidare agevolmente al chiuso e all'aperto.

*Mentre le comuni carrozzelle elettriche con il manubrio sono appross. $650 \times 1.200 \times 1.100 \text{ mm}$ [P x L x H]

Portatile

Facile da smontare e trasportare in 4 sole mosse

Vuoi uscire in auto con la famiglia? Non pensarci su! WHILL Model C è stata progettata per essere smontata con facilità e caricato su qualsiasi automobile. Perché vogliamo farti godere della libertà non soltanto di muoverti liberamente in casa, ma anche di spostarti sempre più lontano. Per lo shopping del weekend o per una gita di famiglia, WHILL Model C ti conduce verso orizzonti completamente nuovi.


Utilizza le leve per smontare facilmente

in tre parti

Step

Rimuovi la

batteria

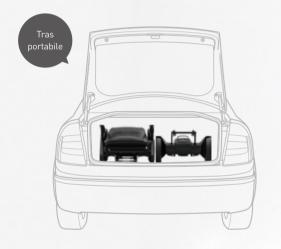

Inseribile anche nel bagagliaio di una berlina. *
Puoi rimontarla quando giungi a destinazione e
sei libero di andare alla scoperta della zona in
tutta sicurezza.



*Le immagini mostrate sopra sono a scopo puramente illustrativo.





Facile e sicuro

Progettata pensando innanzitutto all'utente

Abbiamo ideato un dispositivo per la mobilità che potesse essere usato in sicurezza da adulti e bambini e trasportato con facilità. Grazie al freno di sicurezza e al comando di prevenzione delle curve in discesa, potrai goderti la guida in sicurezza anche sui pendii.



Model C offre il controllo completo del movimento senza sforzo. Puoi guidare con le dita avanti/indietro e a destra/sinistra



I braccioli si sollevano per facilitare il trasporto. Puoi persino stare sulla pedana senza cadere.



Quando togli la mano dal controller, si attivano automaticamente i freni per maggiore sicurezza in discesa.



Il sistema a due motori, che controllano entrambi i lati, consente di guidare senza problemi attraverso superfici in pendenza.

Altre funzioni

Maggiore versatilità per un design su misura

Dotata di numerose funzionalità, WHILL Model C fornisce una mobilità più pratica e sicura. Connettendola allo smartphone* tramite Bluetooth®LE puoi mettere a punto le impostazioni di velocità e accelerazione, e persino controllarle in remoto. Per non parlare della batteria leggera estraibile, che puoi scegliere dove ricaricare. Infine, con la guida vocale che rileva le salite ripide e una chiave wireless che facilita il funzionamento, sei pronto per spostarti in sicurezza.

(*) È necessario installare prima l'applicazione.

APP







Con Model C puoi sterzare senza mani. Ricorda però che il dispositivo deve essere azionato soltanto dall'utente seduto.

Movimento regolare

Model C utilizza due motori ad alta potenza integrati nelle ruote, sviluppati in collaborazione con Nidec Corporation, per garantire una guida regolare anche a velocità molto basse.



Carica

Batteria leggera

Dotata di batteria del peso di 2,8 kg (Panasonic)

Rimuovibile e ricaricabile

a casa (batteria agli ioni di litio)

5

ore di carica

__

 $15 \, \text{km}$

raggio di guida

 1000_{cicli}

Batteria a lunga durata

*In base ai test svolti internamente.

*I valori mostrati sono puramente indicativi

e assolutamente non garantiti.

*La durata effettiva della batteria
varierà in funzione di fattori come temperatura

esterna,

uso e condizioni di guida.





Estrarre la batteria non è mai stato così facile! Basta tirare una leva e sollevarla. Puoi controllare il livello della batteria a vista in ogni momento.

2,8kg



Guida vocale per sicurezza

Un messaggio vocale sarà riprodotto automaticamente per segnalare eventuali pericoli come pendii ripidi.



Smart Key

Blocco wireless disponibile. (Funzione standard)

9

Optional

Puoi scegliere tra una vasta gamma di optional.

Seleziona il tuo colore preferito tra i sei disponibili sotto.



Caratteristiche

15 km In funzione delle condizioni della strada

5 cm 10° 760mm

550×985×740-940 mm Appross. 52 kg Tempo di carica Pneumatici anteriori Pneumatici posteriori Braccioli

Carico Max

Batteria

Condizioni operative**

5 ore Omni-wheel Pneumatici pieni A sollevamento

115 kg Ioni di litio (25,2V 10,0Ah)


-15°C~40°C

Personalizza


Rendila tua

Profondità e altezza di seduta, altezza e angolo dello schienale, altezza del controller, posizione dei braccioli: personalizza come vuoi, per soddisfare le tue esigenze.

Questi optional devono essere installati da un tecnico autorizzato.

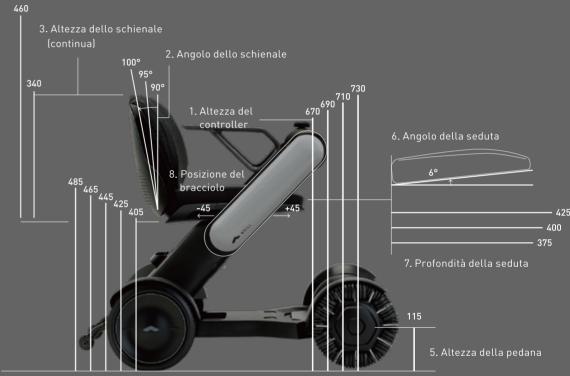

4. Altezza della seduta da terra

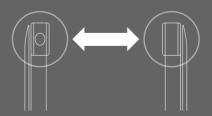

Si può configurare il controller a destra o a sinistra.

| 1. Altezza del controller | 670, 690, 710, 730 mm |
|----------------------------------|----------------------------|
| 2. Angolo dello schienale | 90, 95, 100° |
| 3. Altezza dello schienale | 340 - 460 mm (continua) |
| 4. Altezza della seduta da terra | 405, 425, 445, 465, 485 mm |
| 5. Altezza della pedana | 115 mm |
| 6. Angolo della seduta | 6° |
| 7. Profondità della seduta | 375, 400, 425 mm |
| 8. Posizione del bracciolo | 45, 0, +45 mm |

^{*}La velocità può essere limitata sui pendii ripidi. **In caso di notevole diminuzione della temperatura della batteria, la velocità massima può essere limitata.

